

## Buku Petunjuk Manual Pengukur Tinggi Badan Bayi MTR-BABY001

Buku manual ini akan membantu anda mengerti tentang pengoperasian dan perawatan produk dengan baik. Perlu diingat bahawa produk harus digunakan secara benar dan harus mematuhi buku manual ini. PT. Sinko Prima Alloy tidak bertanggung jawab atas kecelakaan dimana pengguna tidak mematuhi buku manual ini. PT. Sinko Prima Alloy memiliki hak cipta dari buku manual ini. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PT. Sinko Prima Alloy. Semua material yang berhubungan dengan buku manual ini tidak boleh di fotocopy, di produksi lagi, atau diterjemahkan ke bahasa lain.

Material dilindungi dengan hukum hakcipta, tapi tidak terbatas pada informasi rahasia seperti informasi teknis dan paten informasi terkandung dalam buku manual ini, pengguna tidak boleh memberikan informasi kepada pihak ketiga yang tidak relevan.

Pengguna harus mengerti bahwa di buku manual ini tidak ada yang memberikan izin ke pengguna secara tegas atau implisit. Semua hak atau lisensi untuk property intellectual PT. Sinko Prima Alloy.

PT. Sinko Prima Alloy mempunyai hak untuk memodifikasi, update dan menjelaskan buku manual ini.

### Tanggung jawab dari Pabrikasi

PT. Sinko Prima Alloy hanya menganggap dirinya bertanggung jawab atas segala efek pada keselamatan, kendala dan kinerja peralatan dari unit, jika:

Operasi perakitan, ekstensi, penyesuaian ulang, modifikasi atau perbaikan dilakukan oleh orang yang disahkan oleh PT. Sinko Prima Alloy. Instrumen digunakan sesuai dengan instruksi untuk digunakan. PT. Sinko Prima Alloy akan menyediakan permintaan daftar part, diskripsi, instruksi kalibrasi atau informasi lainnya dalam perbaikan perseorangan untuk memperbaiki komponen dari unit yang di tunjuk oleh PT. Sinko Prima Alloy sebagai komponen yang dapat diperbaiki oleh petugas service.

### Informasi Produk

**Nama Produk:** Pengukur Tinggi Badan Bayi

**Model:** MTR-BABY001

### Ketentuan di Buku Manual

Petunjuk ini ditujukan untuk memberi konsep utama tindakan pengamanan.

### Peringatan

**Label Peringatan** label menyarankan tindakan atau situasi tertentu yang mengakibatkan cedera pribadi atau kematian.

### Perhatian

**Label Perhatian** menyarankan tindakan atau situasi yang mengakibatkan kerusakan produk, data yang tidak akurat atau pembatalan prosedur.


### Catatan

**Sebuah Catatan** membuktikan informasi yang berguna dilihat dari fungsi atau prosedur.

### Perhatian

1. Berikan servis ke teknisi professional.
2. Simpan perangkat di lingkungan yang bersih dan hindari getaran selama penyimpanan.
3. Jangan membersihkan permukaan unit dengan cairan yang dapat menyebabkan korosi.
4. Setiap digunakan wajib dibersihkan, dapat menggunakan alkohol medis dan lap kering.
5. Posisi atau postur tubuh pasien sangat berpengaruh terhadap pembacaan, baca kembali instruktur penggunaan untuk pengukuran.

### Spesifikasi

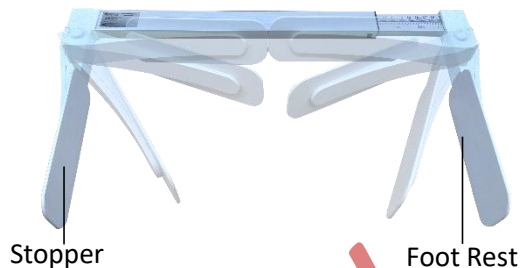


|                     |  |
|---------------------|--|
| Model               | MTR-BABY001  |
| Jangkauan Ukur      | 350 ~ 725 (mm)   |
| Bahan Utama Tiang   | Aluminium  |
| Bahan Foot Rest     | Plastic ABS  |
| Bahan Ruler Stopper | Plastic ABS  |
| Lapisan Permukaan   | Cat Oven (Powder Coating)                              |
| Resolusi            | 1 mm   |
| Mekanisme           | Skrup/Baut<br>Extended/Unextended<br>Folding/Unfolding |
| Dimensi             | 493 x 67 x 60 (mm)                                     |
| Berat               | 400 gr   |

### Perhatian



- Pegang kepala bayi ke bagian foot rest
- Luruskan kaki bayi dengan memegang bagian lutut
- Atur posisi dari stopper

### Pembacaan

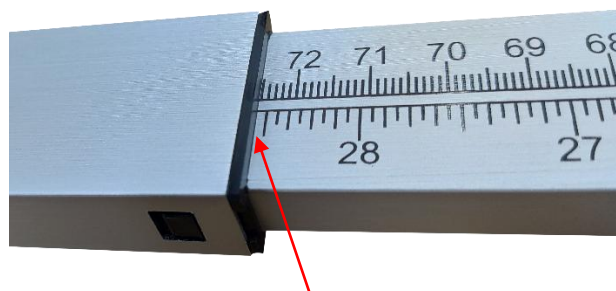

Hasil Bacaan

## Pengenalan

### Tujuan penggunaan

MTR-BABY001 adalah perangkat yang ditujukan untuk mengetahui tinggi badan bayi, range yang dapat diukur 350 ~ 725 (mm) atau bayi 0 ~ 1 tahun.

### Fitur:


Dapat dipasang dengan alas apapun seperti perlat atau selimut  
Stopper yang dapat dilipat, tidak memakan tempat dan kokoh  
Terdapat 2 satuan baca cm dan Inch  
Graduasi 1 mm

## Referensi Standart Pengukuran

### Table Chart untuk bayi Perempuan umur 0 ~ 24 bulan.

#### Length-for-age GIRLS

Birth to 2 years (z-scores)

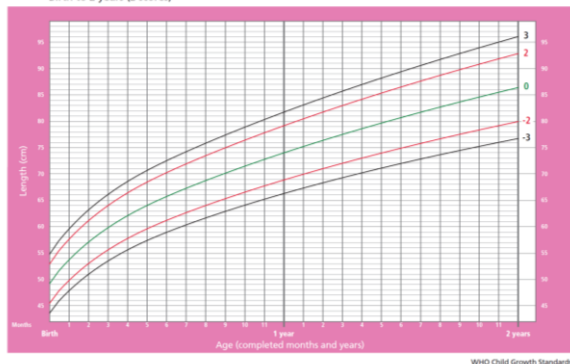


Sumber : WHO (World Health Organization) Child Growth Standard  
[https://www.who.int/childgrowth/standards/chart\\_catalogue/en/](https://www.who.int/childgrowth/standards/chart_catalogue/en/)

### Table Chart untuk bayi perempuan umur 0 ~ 24 bulan.

#### Length-for-age BOYS

Birth to 2 years (z-scores)

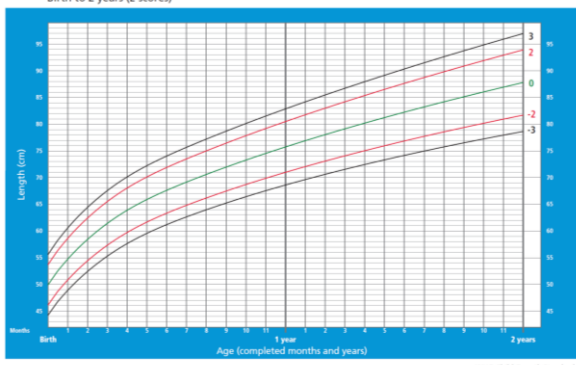

Sumber : WHO (World Health Organization) Child Growth Standard  
[https://www.who.int/childgrowth/standards/chart\\_catalogue/en/](https://www.who.int/childgrowth/standards/chart_catalogue/en/)

## Garansi dan Servis

### Garansi

PT. SINKO PRIMA ALLOY menjamin jika produk PT. SINKO PRIMA ALLOY telah memenuhi tabel spesifikasi dari produk dan akan bebas dari cacat materi dan pengerjaan yang terjadi dalam masa garansi. Garansi tidak berlaku jika:

- Kerusakan terjadi karena penanganan ketika pengiriman ekspedisi
- Kerusakan yang disebabkan karena penggunaan atau pemeliharaan yang tidak benar
- Kerusakan yang disebabkan oleh perubahan atau perbaikan oleh siapapun yang tidak diizinkan oleh PT. SINKO PRIMA ALLOY
- Kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan
- Penggantian atau penghapusan label nomor seri dan label pembuatan

Jika suatu produk yang dilindungi oleh garansi ini dipastikan cacat karena kesalahan bahan, komponen atau pengerjaan yang rusak dan klaim garansi dibuat dalam masa garansi, PT. SINKO PRIMA ALLOY atas kebijakannya sendiri, memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak secara gratis. PT. SINKO PRIMA ALLOY tidak akan menyediakan produk pengganti untuk digunakan ketika produk cacat sedang diperbaiki.

### Informasi Kontak

Jika anda mempunyai beberapa pertanyaan tentang perawatan, spesifikasi teknis atau kegagalan fungsi perangkat, hubungi distributor lokal anda atau

### PT. SINKO PRIMA ALLOY

TAMBAK OSOWILANGUN NO.61

PERGUDANGAN OSOWILANGUN PERMAI BLOK E7-E8

SURABAYA - 60191

No. Telephone 031-7492882, 7482816, 7482835

Email:

[sinkoprime@gmail.com](mailto:sinkoprime@gmail.com)

[teknik.sinkoprime@gmail.com](mailto:teknik.sinkoprime@gmail.com)

Website:

<http://www.elitech.co.id>

Nomor Dokumen : SPA-BM/PROD-112 A

Tanggal Terbit : 01 Oktober 2019

Revisi : 00