

CONTROLLED COPY

PT. SINKO PRIMA ALLOY

TAMBAK OSOWILANGUN NO.61
PERGUDANGAN OSOWILANGUN PERMAI BLOK E7-E8
SURABAYA - 60191
TLP. 031-7492882,74828816,7482835
sinkoprima@gmail.com
teknik.sinkoprima@gmail.com
Website: <http://www.elitech.id>

No Document
Tanggal Terbit
Revisi

: SPA-BM/PROD-201
: 01 September 2023
: 01

Terimakasih banyak telah membeli produk kami timbangan Digital Ibu dan Anak (Digit-Pro IDA) Elitech. Bacalah buku manual berikut ini sebelum mengoperasikan unit ini.

Untuk Pengguna

© Hak cipta oleh PT. Sinko Prima Alloy

PT. Sinko Prima Alloy

Jl. Tambak Osowilangun No. 61

Pergudangan Osowilangun Permai Blok E7-E8.

Surabaya – Jawa Timur. Indonesia

Tel: +62-31-7482816, 7492882

Fax: +62-31-7482865

Kode Pos: 60191


E-mail: sinkoprima@gmail.com

Website : www.elitech.id

Catatan

- Untuk memastikan pengguna menggunakan produk dengan benar, silahkan baca buku manual sebelum menggunakan produk ini
- Harap menyimpan Buku Manual baik-baik.
- Perusahaan tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan perawatan gratis untuk setiap kesalahan atau kerusakan karena pengguna tidak mengikuti petunjuk dari buku manual dan tidak memelihara dan menjaga peralatan.
- Perusahaan menyediakan produk-produk berkualitas sesuai dengan standar perusahaan.
- Daftar perlengkapan ada pada penjelasan akhir di buku manual ini.

1. Struktur

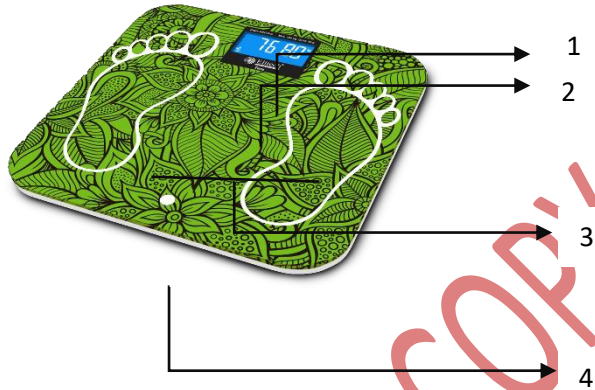

- 1. LCD Display
- 2. TARE Button
- 3. Footprint

4. Waterpass

2. Spesifikasi Teknis


SPESIFIKASI TEKNIS		
Model	DIGIT-PRO IDA	
Baterai	3 Baterai "AAA"/4 Baterai "AAA"	
Power	Adaptor DC 5V / Adaptor DC 6V	
Layar	3.2" Inch	
Graduasi	Anak	0.05 kg
	Ibu	0.05 kg
Jangkauan	Min	Anak : 0.25 kg, Ibu : 5 kg
	Max	Total 150 kg
Berat unit	kg / lb	
Auto Off	10 detik	
Berat Bersih	2.2 kg (hanya unit) ≤ 2.5 kg (dengan semua perlengkapan)	

Dimensi	310 mm(P) x 310 mm(L) x 41 mm(T)
Fitur	Mother Mode & Child Mode ; Tare ; Bluetooth


3. Fungsi Indikasi

3-1. Unit: berada di dekat baterai berfungsi untuk memilih unit yang diinginkan dalam mode berat (kg/lb)

3-2. TARE: untuk memilih mode

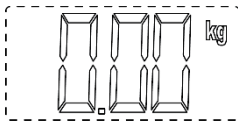

Mode untuk penimbangan Ibu

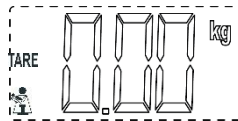


Mode untuk penimbangan Anak

4. Instruksi Pengoperasian


4-1. Pilih unit sebelum menggunakan

- Buka tutup baterai di bagian belakang timbangan.
- Pasang baterai didalam dan pastikan +/- terminal benar.
- Tutup penutup baterai dan tunggu sampai "0.00kg" tampil.
- Tekan "UNIT" untuk memilih unit yang diinginkan (kg/lb).

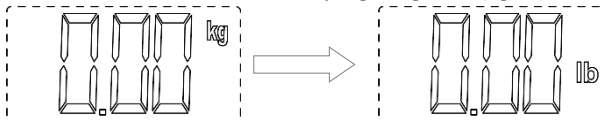

Catatan : Letakkan timbangan ditempat yang permukaannya rata dan keras (dilihat dari Water pass). Kemudian ibu dapat memulai penimbangan dan tetap diatas sampai timbangan menunjukkan hasil beratnya. Jika timbangan tidak sedang beroperasi 14 detik maka timbangan akan mati secara otomatis.


- Setelah selesai proses penimbangan ibu, maka akan berganti ke mode penimbangan anak dengan cara menekan tombol "TARE", dengan tampilan sebagai berikut.

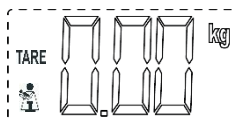


Catatan: Pada mode penimbangan anak, ibu tetap berada diatas timbangan dan mulailah Ibu untuk menggendong anaknya. Angka akan berkedip atau terkunci jika proses penimbangan telah menunjukkan hasil beratnya.

4-2. Mengukur (Unit kg dipilih)


- A. Letakkan timbangan pada permukaan yang datar dan keras (dilihat dari Water pass).
- B. Silahkan berdiri di kaca timbangan langsung untuk menyalakan timbangan.

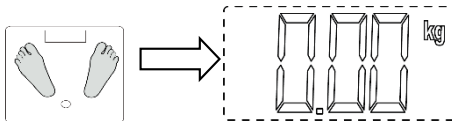

- C. Berdiri diam dan data berat badan akan terkunci secara otomatis setelah berkedip ketika stabil. Kemudian timbangan akan mati setelah 14 detik.

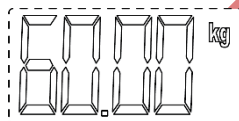

Hasil penimbangan Ibu

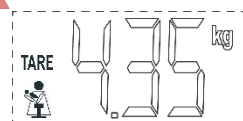

Hasil penimbangan Anak

Catatan: Jika Anda ingin mengukur sekali lagi, silahkan melangkah keluar, kemudian menginjak timbangan kembali.

5. Pengaturan dan Penggunaan aplikasi SAM IoT

- 5-1. Unduh aplikasi SAM IoT pada Playstore atau scan QR Code dibawah untuk mengunduh.




- 5-2. Registrasi dan Sign In dengan cara memasukkan Nama Lengkap, Email, Passwaord, dan konfirmasi Password, kemudian klik "SIGN UP".
- 5-3. Masukkan kode verifikasi dan klik "VERIFY".


5-4. Setelah registrasi selesai kembalik ke sign in.

5-5. Masukkan email dan password klik “SIGN IN” dan masuk dashboard.


CONTROLLED COPY

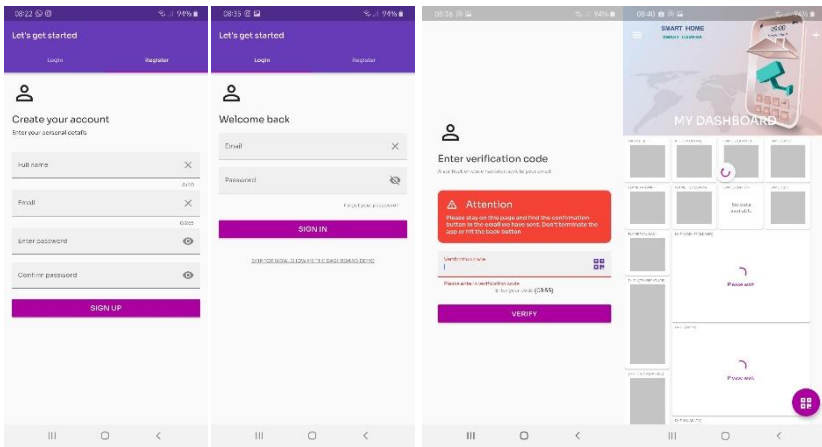


- 5-6. Untuk membuat widget baru, klik garis tiga pada dashboard, kemudian pilih “Add new device”.
- 5-7. Klik “DISCOVER BLUETOOTH DEVICE” kemudian nyalakan device.
- 5-8. Klik “TURN ON BLUETOOTH”. Aktifkan Bluetooth.
- 5-9. Pilih Bluetooth sesuai dengan device.
- 5-10. Masukkan Nama Device dan Pilih Model “Elitech Digit-Pro IDA”.
- 5-11. Klik “ADD” dan pilih “Sure”.
- 5-12. Jika unit telah berhasil terhubung maka akan muncul notifikasi “Success”.

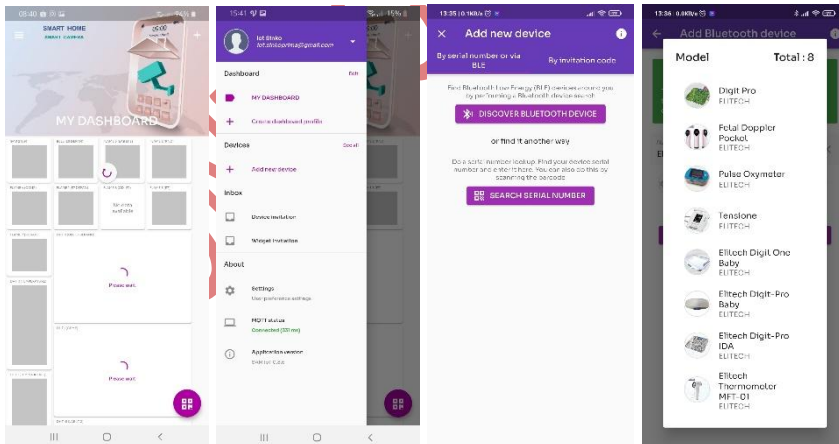

- 5-13. Kembali ke halaman utama, pilih widget yang telah dibuat sebelumnya pada dashboard.
- 5-14. Tekan “Start” untuk memulai pengukuran. Pastikan koneksi bagus dan unit menyala.
- 5-15. Tekan “TARE” pada unit untuk memasuki mode menggondong bayi.
- 5-16. Gendong bayi setelah menekan tombol “TARE”.
- 5-17. Akan muncul pilihan “Submit” untuk menyimpan data dan “x” untuk mengulangi pengukuran.
- 5-18. Data pengukuran akan terekam pada aplikasi.
- 5-19. Tekan “Stop” untuk memutus hubungan antar perangkat.

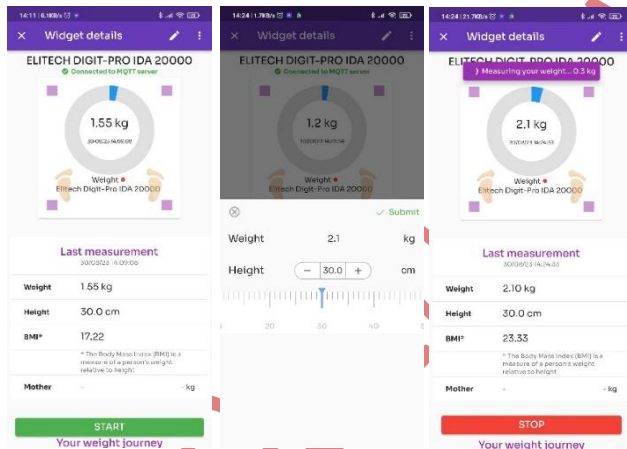


- 5-20. Untuk menghapus widget pada tampilan Dashboard pilih widget yang ingin dihapus.
- 5-21. Klik dan tahan widget kemudian klik icon sampah pada pojok kanan atas.
- 5-22. Pilih “YES”

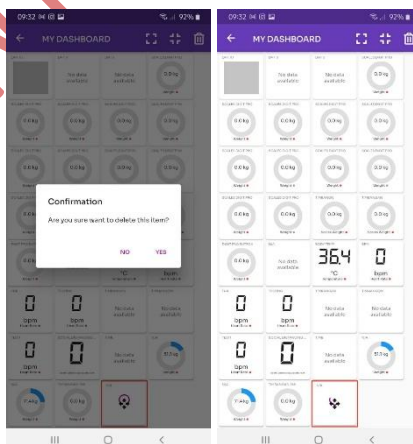

6. Pesan Indikasi

6-1. Indikasi baterai lemah. Ketika “Lo” tampil, timbangan akan mati setelah beberapa detik dan ganti baterai.

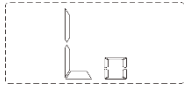

6-2. Indikasi overload. Ketika “Err” tampil, ganti beban pada timbangan untuk menjaga sensor

7. Peringatan

7-1. Pastikan timbangan ada di permukaan datar. Hindari karpet atau permukaan yang lembut.

7-2. Jika aplikasi Bluetooth tidak bisa tersambung / error, mulai ulang aplikasi.

7-3. Permukaan timbangan akan licin jika basah. Pastikan kaca dan kedua kaki Anda kering sebelum digunakan.

7-4. Timbangan ini tidak tahan air.

7-5. Bersihkan timbangan dengan kain sedikit basah. **JANGAN** menggunakan bahan kimia / abrasif untuk membersihkan timbangan.

7-6. Harap lepaskan baterai, jika timbangan tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama.

8. Penjelasan Simbol-Symbol

1		Peralatan tipe B
2		Peralatan kelas II
3		Instruksi Pengoperasian
4		Lihat Buku Manual
6		Peringatan
7		Nomer Seri
8		Produsen
9		Barang tidak boleh langsung dibuang ke tempat sampah

CONTROLLED COPY

TIMBANGAN DIGITAL IBU DAN ANAK
DIGIT-PRO IDA

BUKU MANUAL

CONTROLLED COPY

CONTROLLED COPY