

## Buku Manual

### Penggaris Pengukur Tinggi Badan

#### PTB-2MTR

Buku manual ini akan menolong anda mengerti tentang pengoperasian dan perawatan produk dengan baik. Perlu diingat bahwa produk harus digunakan secara benar dan harus mematuhi buku manual ini. Pengguna yang tidak mematuhi buku manual ini mungkin akan menyebabkan unit tidak dapat berfungsi dengan benar atau kecelakaan dimana PT. Sinko Prima Alloy tidak dapat dimintai tanggung jawab. PT. Sinko Prima Alloy memiliki hak cipta dari buku manual ini. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PT. Sinko Prima Alloy. Semua material yang berhubungan dengan buku manual ini tidak boleh di fotocopy, di produksi lagi, atau diterjemahkan ke Bahasa lain.

Material dilindungi dengan hukum hak cipta, tapi tidak terbatas pada informasi rahasia seperti informasi teknis dan paten informasi terkandung dalam buku manual ini, pengguna tidak boleh memberikan informasi kepada pihak ketiga yang tidak relevan.

Pengguna harus mengerti bahwa di buku manual ini tidak ada yang memberikan izin ke pengguna secara tegas atau implisit. Semua hak atau lisensi untuk property intellectual PT. Sinko Prima Alloy.

PT. Sinko Prima Alloy mempunyai hak untuk memodifikasi, update dan menjelaskan buku manual ini.

#### Tanggung jawab dari Pabrikasi

PT. Sinko Prima Alloy hanya menganggap dirinya bertanggung jawab atas segala efek pada keselamatan, kendala dan kinerja peralatan dari unit, jika:

Operasi perakitan, ekstensi, penyesuaian ulang, modifikasi atau perbaikan dilakukan oleh orang yang disahkan oleh PT. Sinko Prima Alloy. Instrumen digunakan sesuai dengan instruksi untuk digunakan. PT. Sinko Prima Alloy akan menyediakan permintaan daftar part, diskripsi, instruksi kalibrasi atau informasi lainnya dalam perbaikan perseorangan untuk memperbaiki komponen dari unit yang di tunjuk oleh PT. Sinko Prima Alloy sebagai komponen yang dapat diperbaiki oleh petugas service.

#### Informasi Produk

**Nama Produk:** Penggaris Pengukur Tinggi Badan

**Model:** PTB-2MTR

#### Ketentuan di Buku Manual

Petunjuk ini ditujukan untuk memberi konsep utama tindakan pengamanan.

#### Peringatan

**Sebuah Peringatan** label menyarankan tindakan atau situasi tertentu yang mengakibatkan cedera pribadi atau kematian.

#### Perhatian

**Sebuah Perhatian** label menyarankan tindakan atau situasi yang mengakibatkan kerusakan produk, data yang tidak akurat atau pembatalan prosedur.

#### Catatan

**Sebuah Catatan** membuktikan informasi yang berguna dilihat dari fungsi atau prosedur.

#### Perhatian

1. Berikan servis ke teknisi professional.
2. Simpan perangkat di lingkungan yang bersih dan hindari getaran selama penyimpanan.
3. Jangan membersihkan permukaan unit dengan cairan yang dapat menyebabkan korosi.
4. Setiap digunakan wajib dibersihkan, dapat menggunakan alkohol medis dan lap kering.
5. Tempatkan unit ke media yang datar dan minimalis penggunaan alas.

6. Jika menggunakan alat lain atau alas, atur lagi ketinggian unit sehingga sama atau setara dengan titik nol.
7. Posisi atau postur tubuh pasien sangat berpengaruh terhadap pembacaan, baca kembali instruktur penggunaan untuk pengukuran.

#### Spesifikasi



Model	PTB-2MTR
Jangkauan Ukur	0~10(cm), 60 ~ 210 (cm)
Bahan Utama Tiang	Aluminium
Bahan Plat Tumpuan Kaki	Plat Besi
Penyangga Tiang	Pipa Aluminium
Footprint	Ya
Lapisan Permukaan	Cat Oven (Powder Coating)
Landasan Kepala	ABS
Landasan Kaki	Plat Besi
Konstruksi	Knock Down
Mekanisme	Skrup/Baut
Resolusi	1 mm
Dimensi	400 x 400 x 2140 (mm)
Berat	4.35 kg

#### Pengenalan

#### Tujuan penggunaan

PTB-2MTR adalah perangkat yang ditujukan untuk mengetahui tinggi badan dari pasien, range yang dapat diukur 0~10 (cm) 60 ~ 210 (cm).

#### Fitur:

Dapat dipakai secara bersamaan dengan berbagai macam timbangan badan.


Dapat mengukur panjang dan tinggi badan remaja dan dewasa. Ketinggian pengukuran angka "0" dapat disesuaikan.

#### Penggunaan

1. Jika menggunakan timbangan badan sebagai dasar pengukuran tinggi badan maka ukur ketinggian timbangan terlebih dahulu dan atur pengukur tinggi badan sesuai dengan indicator yang ada pada height meter bagian bawah.



2. Ketika menggunakan tambahan timbangan, atur ketinggian pada posisi 0 cm.

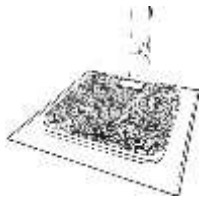


3. Jika height meter digunakan tanpa timbangan pastikan indicator height meter pada posisi 0 cm.



4. Kunci hasil pengaturan tersebut di atas dengan fastener bolt pada height meter.




5. Pengukuran pada pasien dilakukan dengan cara Tarik stoper ke atas sampai bagian ruas height meter atas terkunci pada ruas height meter tengah. Ruas height meter atas terkunci pada ruas height meter tengah.

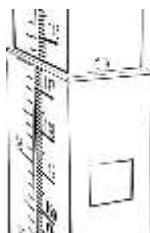

6. Posisikan unit PTB-2MTR menempel dengan dinding dan pastikan pengguna berdiri dengan tegap seperti gambar berikut.



7. Hasil pembacaan pada height meter.

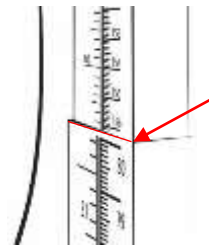

## Garansi dan Servis

### Garansi

PT. SINKO PRIMA ALLOY menjamin jika produk PT. SINKO PRIMA ALLOY telah memenuhi tabel spesifikasi dari produk dan akan bebas dari cacat materai dan pengerjaan yang terjadi dalam masa garansi.

Garansi tidak berlaku jika:

- Kerusakan terjadi karena penanganan ketika pengiriman ekspedisi.
- Kerusakan yang disebabkan karena penggunaan atau pemeliharaan yang tidak benar.
- Kerusakan yang disebabkan oleh perubahan atau perbaikan oleh siapapun yang tidak diizinkan oleh PT. SINKO PRIMA ALLOY.
- Kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan.
- Penggantian atau penghapusan label nomor seri dan label pembuatan.

Jika suatu produk yang dilindungi oleh garansi ini dipastikan cacat karena kesalahan bahan, komponen atau pengerjaan yang rusak dan klaim garansi dibuat dalam masa garansi, PT. SINKO PRIMA ALLOY atas kebijakannya sendiri, memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak secara gratis. PT. SINKO PRIMA ALLOY tidak akan menyediakan produk pengganti untuk digunakan ketika produk cacat sedang diperbaiki.

### Informasi Kontak

Jika anda mempunyai beberapa pertanyaan tentang perawatan, spesifikasi teknis atau kegagalan fungsi perangkat, hubungi distributor lokal anda.

#### PT. SINKO PRIMA ALLOY

TAMBAK OSOWILANGUN NO.61

PERGUDANGAN OSOWILANGUN PERMAI BLOK E7-E8

SURABAYA - 60191

No. Telephone 031-7492882,74828816,7482835

Email: [sinkoprime@gmail.com](mailto:sinkoprime@gmail.com)

[teknik.sinkoprime@gmail.com](mailto:teknik.sinkoprime@gmail.com)

Website: <http://www.elitech.co.id>

Nomor Dokumen : SPA-BM/PROD-113  
Tanggal Terbit : 12 Agustus 2022  
Rev : 03