



BUKU MANUAL  
**UV ROOM STERILIZER MUV-02**



## 1. PENDAHULUAN

Terimakasih untuk memilih produk kami Mentor UV Room Sterilizer. Harap baca buku manual dengan seksama sebelum mengoperasikan dan disimpan untuk pemakaian yang akan datang. Pabrikan berhak untuk merevisi atau mengubah sesuatu saat dibutuhkan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Salah satu alat yang digunakan untuk keperluan sterilisasi ruangan adalah sebuah lampu ultraviolet. Lampu ultraviolet ini biasa digunakan didalam ruang OK, ICU dan lain-lain yang membutuhkan suatu kondisi ruangan yang steril dengan ukuran ruangan maksimal  $5 \times 5 \text{ m}^2$  dan masa hidup lampu ultraviolet maksimal 3000 jam.

Untuk itu dari pihak pabrik kami merencanakan suatu lampu yang dapat mendukung kebutuhan tersebut. Kami sangat memperhatikan kualitas barang kami yang beredar dipasaran agar dapat diterima dengan baik di setiap rumah sakit atau klinik.

Untuk itu kami membuat alat yang kami bernama MENTOR UV ROOM STERILIZER dengan tipe MUV-02.



Gambar MUV-02

## 2. STANDARD OPERASIONAL PEMAKAIAN

Lampu ini sangat mudah untuk dioperasikan, karena bentuknya yang sederhana tetapi tetap elegan, berikut cara pengoperasian alat:

### A. PERSIAPAN PERLENGKAPAN

1. Siapkan unit monitoring room sterilizer.
2. Siapkan kabel power.
3. Siapkan remote.








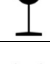

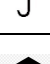
### B. PENGOPERASIAN

1. Lepaskan pembungkus lampu UV.
2. Tempatkan unit di tempat yang ingin disterilkan.
3. Putar Pengunci Lampu yang terhubung pada tiang kemudian arahkan/angkat ke atas agar lampu membuka seperti gambar di SOP, setelah itu putar untuk rapatkan pengunci lampu tersebut.
4. Pasang kabel power pada unit.
5. Hubungkan kabel power ke jala-jala PLN.
6. Setting timer pada unit sesuai yang diinginkan.
7. Tekan tombol on/off.
8. Arahkan saklar ke remote jika ingin menyalakan unit menggunakan remot, arahkan saklar kmanual untuk menyalakan unit secara manual.
9. Unit akan menyala sesuai waktu pada timer yang sudah di setting.

### 3. SPESIFIKASI MUV – 02

Model / Tipe Produk		UV ROOM STERILIZER MUV-02
Power Supply		220VAC/50/60Hz
Daya		235VA
Power Faktor		0.683
Lifetime Lampu		3000 jam
Dimensi		420 x 400 x 1200 mm
Berat Bersih		15.85 kg
Pengoperasian	Suhu	-10°C ~ 40°C
	Kelembapan	≤90%
	Atmosphere	700 hPa
Transportasi dan Penyimpanan	Suhu	-20°C ~ 55°C
	Kelembapan	≤95%
	Atmosphere	700 hPa

### 4. ARTI SIMBOL

	Peralatan tipe B
	Peralatan Class I
	Instruksi Pengoperasian
	Lihat buku manual
	Peringatan, harap untuk hati-hati.
	Bahaya tegangan tinggi
	Produsen
	Barang tidak boleh langsung dibuang ke tempat sampah
	<i>Fragile</i>
	Sisi ini menghadap ke atas
	Waspada terhadap basah
	Jaga dengan hati-hati

<b>SN</b>	Nomor seri
-----------	------------

## 5. CATATAN

Gunakan kacamata anti UV saat mengoperasikan unit untuk menyeterilkan ruangan agar mata terhindar dari paparan sinar UV. Kosongkan ruangan yang akan diseterilkan karena paparan sinar UV cukup berbahaya. Jangan melihat sinar UV dengan mata telanjang, harap membaca petunjuk penggunaan terlebih dahulu sebelum menggunakan/mengoperasikan unit tersebut.

## 6. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT

Petunjuk Singkat Perbaikan Alat

No	Kerusakan	Kemungkinan Penyebab	Tindakan
1	Lampu tidak dapat menyala	Supply PLN tidak ada Lampu putus Balast rusak Timer rusak	Cek supply PLN Ganti lampu Ganti balast Ganti timer
2	Remote tidak berfungsi	Baterai remot habis Tombol remote rusak	Ganti baterai Perbaiki tombolnya

Pemeliharaan

Bersihkan bodi dengan kain lap yang halus, dan bila menggunakan cairan, gunakanlah cairan yang lembut, seperti sabun.



Peringatan

**Pastikan tegangan listrik dari PLN sudah di lepas sebelum melakukan pemeliharaan.**

## 7. Pembuangan sisa produk

Harap patuhi hukum dan peraturan setempat untuk pembuangan sisa produk, termasuk bahan kemasan, limbah baterai dan produk, dan coba ikuti klasifikasi dan daur ulang.

## 8. Garansi

PT.Sinko Prima Alloy menjamin Mentor UV Room Sterilizer MUV-02 bebas dari pengerjaan dan bahan yang cacat selama jangka waktu (1) tahun sejak tanggal pembelian. Hubungi dealer Anda atau lebih jelasnya. Garansi ini terbatas pada pembeli asli Mentor UV Room Sterilizer MUV-02. Setiap bagian atau rakitan yang rusak akan diperbaiki atau

diganti berdasarkan pertimbangan dan pertimbangan sendiri dari PT.Sinko Prima Alloy jika unit tersebut telah dioperasikan dengan benar selama masa garansi. Item perawatan normal dan komponen sekali pakai tidak tercakup dalam garansi ini. Ongkos kirim jika ada, harus dibayar oleh pembeli.



**PT. SINKO PRIMA ALLOY**

TAMBAK OSOWILANGUN NO.61  
PERGUDANGAN OSOWILANGUN PERMAI BLOK E7-E8  
SURABAYA - 60191

TLP. 031-7492882, 74828816, 7482835

[sinkoprima@gmail.com](mailto:sinkoprima@gmail.com)

[teknik.sinkoprima@gmail.com](mailto:teknik.sinkoprima@gmail.com)

Website: <http://www.elitech.co.id>

File No.: SPA-BM/PROD-121  
File Ver.: 0.1  
Release Date: 08 Maret 2021 rev01

CONTROLLED COPY