



Petunjuk Pengguna

Elitech Baby Length Measuring Board / Papan Pengukur Panjang Bayi MTR BABY-002

Petunjuk pengguna ini akan menolong anda mengerti tentang pengoperasian dan perawatan produk dengan baik. Perlu diingat bahwa produk harus digunakan secara benar dan harus mematuhi buku manual ini. Pengguna yang tidak mematuhi buku manual ini mungkin akan menyebabkan unit tidak dapat berfungsi dengan benar atau kecelakaan dimana PT. Sinko Prima Alloy tidak dapat dimintai tanggung jawab. PT. Sinko Prima Alloy memiliki hak cipta dari buku manual ini. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PT. Sinko Prima Alloy. Semua material yang berhubungan dengan buku manual ini tidak boleh di fotocopy, di produksi lagi, atau diterjemahkan ke Bahasa lain.

Material dilindungi dengan hukum hak cipta, tapi tidak terbatas pada informasi rahasia seperti informasi teknis dan paten informasi terkandung dalam buku manual ini, pengguna tidak boleh memberikan informasi kepada pihak ketiga yang tidak relevan.

Pengguna harus mengerti bahwa di buku manual ini tidak ada yang memberikan izin ke pengguna secara tegas atau implisit. Semua hak atau lisensi untuk property intellectual PT. Sinko Prima Alloy.

PT. Sinko Prima Alloy mempunyai hak untuk memodifikasi, update dan menjelaskan buku manual ini.

Tanggung jawab dari Pabrikan

PT. Sinko Prima Alloy hanya menganggap dirinya bertanggung jawab atas segala efek pada keselamatan, kendala dan kinerja peralatan dari unit, jika:

Operasi perakitan, ekstensi, penyesuaian ulang, modifikasi atau perbaikan dilakukan oleh orang yang disahkan oleh PT. Sinko Prima Alloy. Instrumen digunakan sesuai dengan instruksi untuk digunakan. PT. Sinko Prima Alloy akan menyediakan permintaan daftar part, diskripsi, instruksi kalibrasi atau informasi lainnya dalam perbaikan perseorangan untuk memperbaiki komponen dari unit yang di tunjuk oleh PT. Sinko Prima Alloy sebagai komponen yang dapat diperbaiki oleh petugas service.

Informasi Produk

Nama Produk : Elitech Baby Length Measuring Board /
Papan Pengukur Panjang Bayi

Model : MTR BABY-002

Ketentuan di Petunjuk pengguna

Petunjuk ini ditujukan untuk memberi konsep utama tindakan pengamanan.

Peringatan

Sebuah Peringatan label menyarankan tindakan atau situasi tertentu yang mengakibatkan cedera pribadi atau kematian.

Perhatian

Sebuah Perhatian label menyarankan tindakan atau situasi yang mengakibatkan kerusakan produk, data yang tidak akurat atau pembatalan prosedur.

Catatan

Sebuah Catatan membuktikan informasi yang berguna dilihat dari fungsi atau prosedur.

Pengenalan


Tujuan penggunaan

MTR Baby-002 adalah perangkat yang ditujukan untuk mengetahui panjang atau tinggi badan bayi, range yang dapat diukur 10 ~ 100 (cm). Alat ini didesign sangat sederhana, karena dalam penggunaannya, bayi cukup ditidurkan diatas perangkat dengan posisi kepala menempel pada headbase ini lalu menempatkan footpiece ke bagian kaki bayi. Alat ini cocok digunakan bayi pada rentang usia 0 ~ 23 bulan.

Fitur:

- Pengoperasian dengan mudah.
- Graduasi 1 mm
- Pembacaan yang akurat

Bagian :

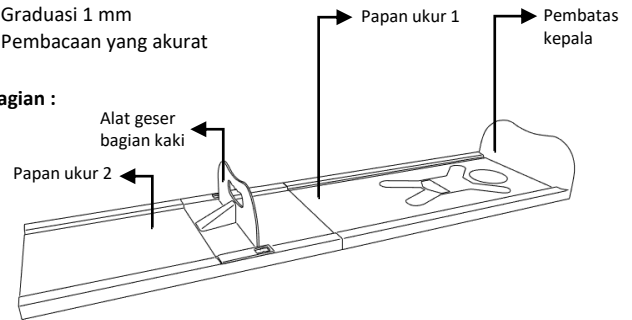

Gambar 1

Persiapan dan Cara Penggunaan

1. Susun papan ukur 1 dan 2, masukkan pada knob penguncinya
2. Posisikan bayi pada posisi terlentang dengan posisi kepala pada pembatas kepala. Posisikan pandangan bayi pada 90° ke atas
3. Pegang lutut bayi/jangan sampai kaki bayi tertekuk.
4. Geser alat geser bagian kaki hingga menyentuh kaki bayi.
5. Pengukuran dapat melihat skala yang ditunjukkan.

Pemeliharaan dan Perawatan

1. Setelah selesai penggunaan harap dibersihkan papan pengukur panjang bayi.
2. Penyimpanan papan pengukur panjang bayi di tempat yang tertutup, dengan temperatur ruangan sehingga alat tersebut tidak memuai.
3. Hindari penumpukkan alat ukur.
4. Hindari benturan keras.
5. Perawatan secara berkala.

Perhatian

1. Berikan servis ke teknisi profesional.
2. Simpan perangkat di lingkungan yang bersih dan hindari getaran selama penyimpanan.
3. Jangan membersihkan permukaan unit dengan cairan yang dapat menyebabkan korosi.
4. Setiap digunakan wajib dibersihkan, dapat menggunakan alkohol medis dan lap kering.
5. Tempatkan unit ke media yang datar dan minimalis penggunaan alas.
6. Jika menggunakan alat lain atau alas, atur lagi ketinggian unit sehingga sama atau setara dengan titik nol.
7. Posisi atau postur tubuh pasien sangat berpengaruh terhadap pembacaan, baca kembali instruktur penggunaan untuk pengukuran.

Spesifikasi

Model	MTR BABY-002	
Jangkauan ukur	10 ~ 100 (cm)	
Material	Body	ABS
	Foot pad	Rubber
Graduasi	1 mm	
Dimensi	1120 mm (P) x 300 mm (L) x 150 mm (T)	
Berat	≤ 2,5 kg	
Kodisi pemakaian normal	Suhu	10°C ~ 40°C
	Kelembapan	30% ~ 80% RH
	Tekanan atmosfir	800 hpa ~ 1050 hpa
Transportasi dan penyimpanan	Suhu	-20°C ~ 40°C
	Kelembapan	≤95% RH
	Tekanan atmosfir	800 hpa ~ 1050 hpa

Garansi dan Servis

Garansi

PT. SINKO PRIMA ALLOY menjamin jika produk PT. SINKO PRIMA ALLOY telah memenuhi tabel spesifikasi dari produk dan akan bebas dari cacat materi dan pengerjaan yang terjadi dalam masa garansi.

Garansi tidak berlaku jika:

- Kerusakan terjadi karena penanganan ketika pengiriman ekspedisi.
 - Kerusakan yang disebabkan karena penggunaan atau pemeliharaan yang tidak benar.
 - Kerusakan yang disebabkan oleh perubahan atau perbaikan oleh siapapun yang tidak diizinkan oleh PT. SINKO PRIMA ALLOY.
 - Kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan.
 - Penggantian atau penghapusan label nomor seri dan label pembuatan.
- Jika suatu produk yang dilindungi oleh garansi ini dipastikan cacat karena kesalahan bahan, komponen atau pengerjaan yang rusak dan klaim garansi dibuat dalam masa garansi, PT. SINKO PRIMA ALLOY atas kebijakannya sendiri, memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak secara gratis. PT. SINKO PRIMA ALLOY tidak akan menyediakan produk pengganti untuk digunakan ketika produk cacat sedang diperbaiki.

Informasi Kontak

Jika anda mempunyai beberapa pertanyaan tentang perawatan, spesifikasi teknis atau kegagalan fungsi perangkat, hubungi distributor lokal anda.

Referensi


Length-for-age GIRLS

Birth to 6 months (z-scores)




Length-for-age GIRLS

6 months to 2 years (z-scores)

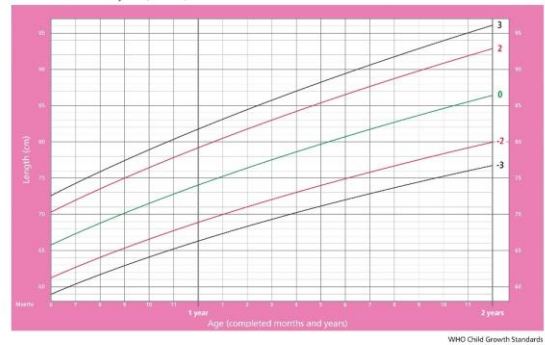


Length-for-age BOYS

Birth to 6 months (z-scores)

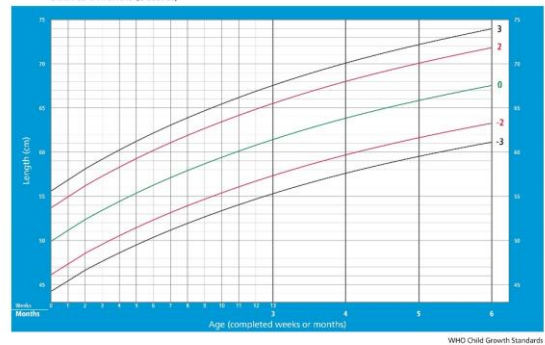

Length-for-age BOYS

6 months to 2 years (z-scores)

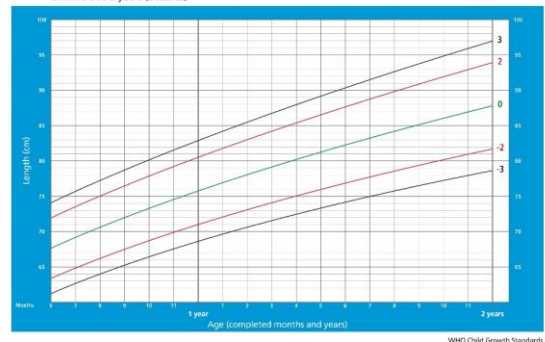

PT. SINKO PRIMA ALLOY

TAMBAK OSOWILANGUN NO.61

PERGUDANGAN OSOWILANGUN PERMAI BLOK E7-E8 SURABAYA - 60191

No. Telephone 031-7492882,74828816,7482835

Email:sinkoprima@gmail.com

teknik.sinkoprima@gmail.com

Website: www.elitech.id

Nomor Dokumen : SPA-BM/PROD-165

Tanggal terbit : 23 Mei 2023

Rev : 05