

TIMBANGAN BABY SCALE BABY ONE

BUKU MANUAL

CONTROLLED COPY

Bab 1 Spesifikasi Teknis Utama Timbangan Baby One

Lingkungan kerja yang normal

Lingkungan pengoperasian

- a) Temperatur : $+10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- b) Kelembaban relative : 30%~85%
- c) Tegangan suplai : AC : 220V, 50 Hz
- d) Tekanan atmosfir : 86 kPa ~ 106kPa

Penyimpanan dan Pemindahan

- a) Temperatur lingkungan : $+10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- b) Kelembaban relatif : $\leq 95\%$
- c) Tekanan atmosfir : 50 kPa ~ 106 kPa


- 1.1 Sumber daya adaptor AC : 220V AC (50-60Hz), Output : 7.5VDC
- 1.2 Sumber daya baterai : 1.5V x 4 pcs Baterai A
- 1.3 Ukuran dimensi keranjang : 600mm(L) x 321mm(W) x 147mm(H)
- 1.4 Ukuran dimensi badan timbangan : 628mm(L) x 340mm(W) x 246mm(H)
- 1.5 Berat bersih total unit : 4.15 kg
- 1.6 Berat kotor total unit : 9 kg

SPESIFIKASI LENGKAP TIMBANGAN BABY ONE

Model / tipe produk	Baby One
Sumber daya baterai	1.5V x 4 pcs baterai A
Tegangan pengenalan adaptor AC	220V
Frekuensi pengenalan	50-60Hz
Maksimum beban	12 kg
Akurasi	10g (0~10 kg) ; 20g (10~12 kg)
Minimum beban terukur	100g
Maksimum tara	9.99kg
Tinggi bayi terukur	40cm~59cm
Daya tahan baterai	800 pengukuran
Medikal grade	Kelas 4
Dimensi baki timbangan	600 (L) x 321 (W) x 147 (H)mm
Dimensi badan timbangan	628 (L) x 340 (W) x 246 (H)mm
Berat bersih	4.15 kg
Berat kotor	9 kg




Bab 2 Konstruksi dan Panel Kontrol Timbangan Baby One

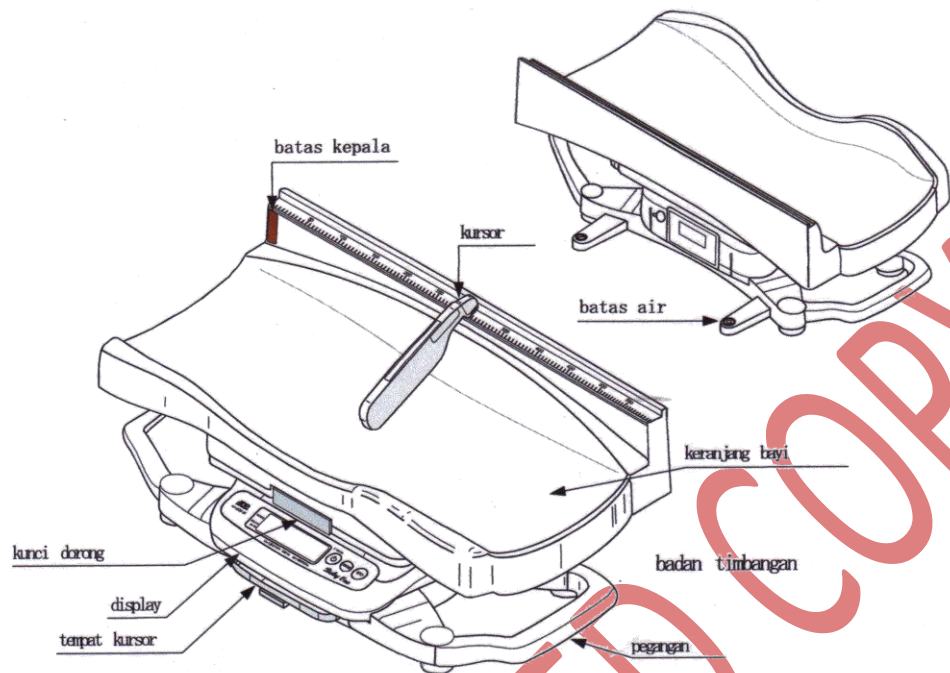2.1 Konstruksi utama dan nama komponen utama




Gambar bagian Baby One

2.2 Keterangan Tombol


-  Tombol power untuk menyalakan atau mematikan unit
-  Tombol memori untuk melihat hasil penimbangan sebelumnya
-  Tombol tara untuk menggunakan kain untuk penimbangan

2.3 Display

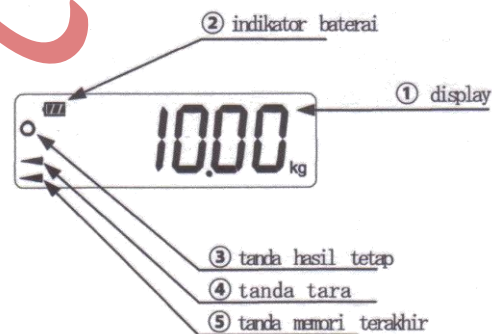


No.	Nama	Keterangan
1	Display	Nilai perhitungan berat bayi
2	Indikator baterai	Bila menggunakan baterai, ada tingkat sisa indikator baterai
3	Tanda hasil tetap	Tanda bulat bila nilai berat sudah ditimbang dengan tepat
4	Tanda tara	Tanda bahwa hasil timbangan adalah sudah dipotong tara
5	Memori terakhir	Hasil nilai penimbangan sebelumnya

2.4 Keranjang Bayi

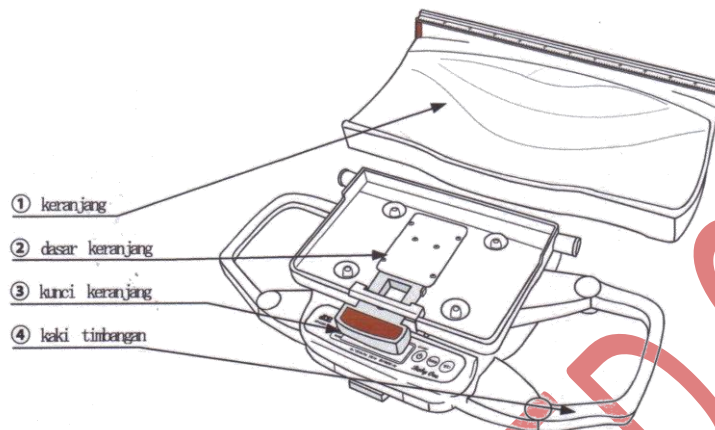


No.	Nama	Keterangan
1	Keranjang bayi	Tempat untuk meletakkan bayi
2	Dasar timbangan	Tempat keranjang bayi
3	Kunci keranjang	Kunci untuk keranjang bayi sebelum menimbang
4	Kaki timbangan	Kaki untuk penahan unit timbangan

2.5 Unit Pengukuran Tinggi

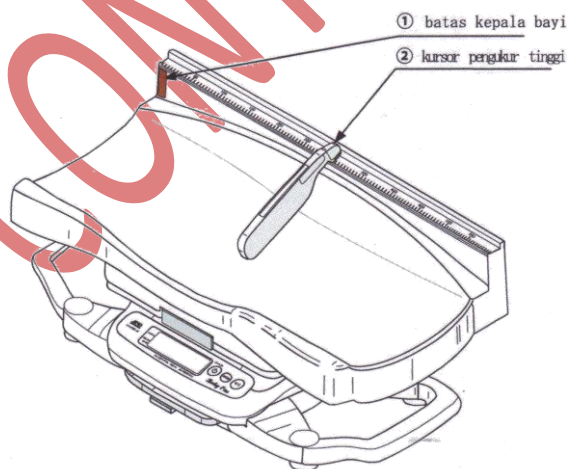


No.	Nama	Keterangan
1	Garis awal pengukuran tinggi	Batas kepala bayi sebagai awal "0 cm"
2	Kursor pengukur tinggi	Sebagai penanda di telapak kaki bayi


2.6 Sumber Daya Baterai

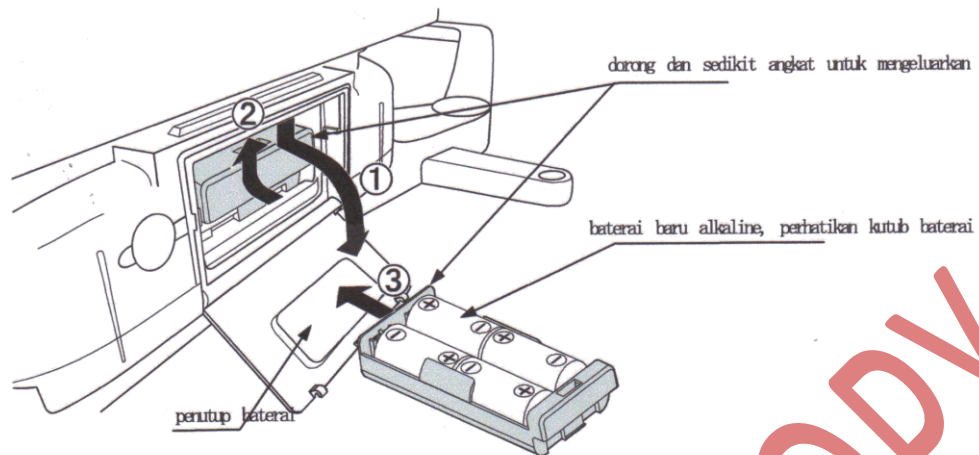

2.7 AC Adaptor

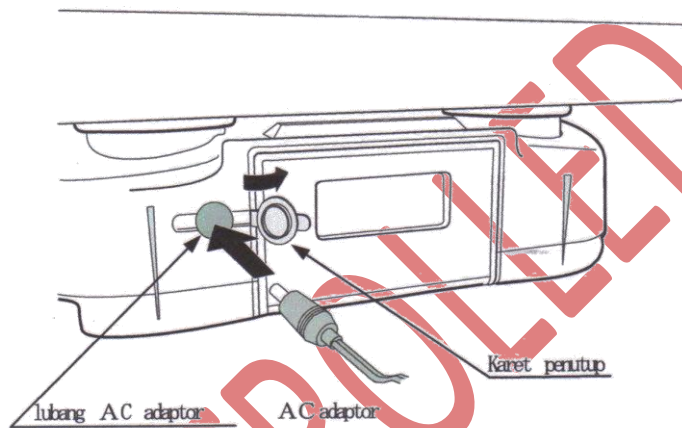

2.8 Mengukur Tinggi Bayi

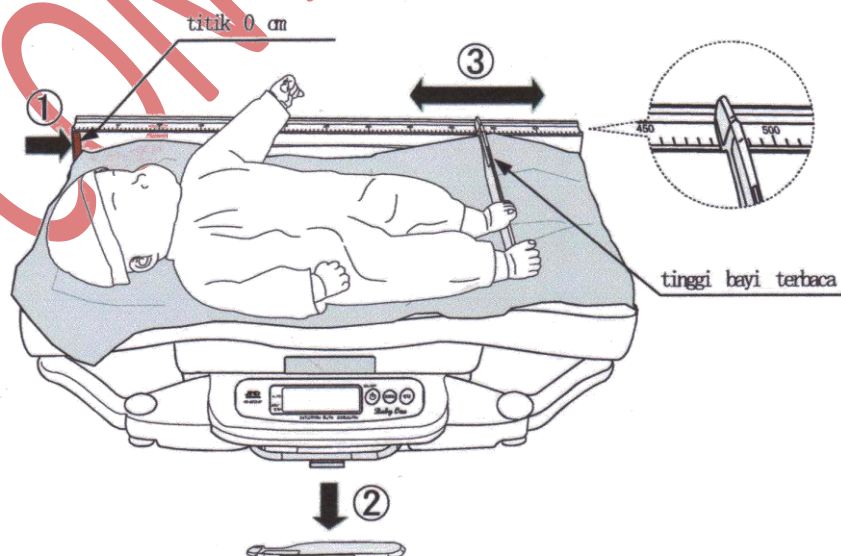

Bab 3 Perhatikan sebelum Pengoperasian

- 3.1 Bacalah petunjuk penggunaan ini secara teliti sebelum mengoperasikan untuk memastikan timbangan dapat digunakan secara aman dan efektif.
- 3.2 Letakkan timbangan di meja yang aman, tidak goyang luas meja harus lebih besar dari timbangan.
- 3.3 Timbangan jangan sampai mudah jatuh dari meja dapat mengakibatkan kecelakaan fatal dan resiko cedera.
- 3.3 Pastikan selalu keranjang dalam keadaan terkunci dengan badan timbangan, keranjang yang tidak terkunci dapat mengakibatkan bayi jatuh.
- 3.4 Dalam melepas atau memasang keranjang timbangan pastikan jari tidak masuk ke dalam lubang kunci.
- 3.5 Saat memasang keranjang timbangan pastikan kaitan terpasang dengan benar.
- 3.6 Pastikan meja dalam keadaan baik dan tidak goyang, jangan meletakkan timbangan di sudut atau dipinggir meja.
- 3.7 Gunakan adaptor asli Elitech.
- 3.8 Sesuaikan ketinggian timbangan dengan memutar setiap kaki dan melihat batas air yang berada pada tengah lingkaran.

Bab 4 Pengoperasian Timbangan Baby One

- 4.1 Pasang kabel adaptor pada steker AC, buka tutup karet pada unit timbangan bagian belakang dan hubungkan soket adaptor ke lubang AC adaptor.
- 4.2 Jika memakai baterai, geser tutup baterai ke arah bawah pada unit timbangan bagian belakang. Dorong tempat baterai dan sedikit diangkat untuk mengeluarkan kotak baterai, masukkan baterai dan dorong tempat baterai hingga terkunci, tutup kembali penutup baterai dengan didorong ke atas.
- 4.2 Tekan tombol “On/Off”, display akan tampil selama satu detik dan tunggu sampai angka “0.00 Kg” tampil.
- 4.2 Baringkan bayi terlentang pada keranjang dengan batas kepala bayi pada batas merah keranjang.

- 4.3 Saat beban mulai stabil nilai pengukuran akan tetap tampil bahkan saat bayi diangkat dan catat hasil penimbangan.
- 4.4 Tampilan display akan kembali menjadi “0 Kg” saat bayi diangkat dalam waktu 8 detik.
- 4.5 Untuk melihat hasil penimbangan sebelumnya tekan tombol “Memori Terakhir”.
- 4.6 Untuk penimbangan dengan menggunakan kain alas, letakkan kain alas di atas keranjang dan tekan tombol “Tara” display akan berubah menjadi “0.00 Kg”.
- 4.7 Untuk mengukur tinggi bayi, letakkan bayi pada posisi terlentang kepala berada di batas merah keranjang sebagai “0 cm” dan letakkan kursor di telapak kaki bayi, usahakan sejajar, lihat berapa nilai pengukuran tinggi bayi pada keranjang (tinggi yang dapat diukur 40 cm – 59 cm).
- 4.3 Untuk menghapus memori tekan tombol satu persatu tanpa melepas tombol sebelumnya dimulai dari “Tara”, “Memori Terakhir” dan “On/Off”. Tanda “-----” akan muncul bila penghapusan memori selesai.

Bab 5 Perawatan dan Pemeliharaan

- 5.1 Pembeli tidak diijinkan untuk membuka atau membongkar isi dalam timbangan. Setiap pemeliharaan atau pembaharuan harus dilakukan oleh orang yang terlatih dan profesional yang berwenang dari PT. Sinko Prima Alloy. Pemeliharaan harus dilakukan dengan komponen asli dari PT. Sinko Prima Alloy.
- 5.2 Dimohon untuk melepas kabel adaptor ketika hendak dimatikan. Jika timbangan ini tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, dimohon untuk melepas kabel adaptor dari sumber listrik, kemudian meletakkan timbangan ini pada tempat yang teduh, dingin dan kering.
- 5.3 Keranjang timbangan seharusnya dipelihara dan dibersihkan secara teratur.

Cara pembersihan keranjang timbangan sebagai berikut:

- a.) Pertama-tama kabel adaptor harus dilepas dari sumber listrik.
- b.) Siapkan ember dan campurkan air bersih serta bahan pembersih (sabun cair atau deterjen netral) dengan perbandingan yang tepat.

- c.) Celupkan spons ke dalam ember tersebut dan gosokkan di permukaan keranjang timbangan.
 - d.) Celupkan lap ke dalam ember yang berisi air bersih tanpa bahan pembersih kemudian gosokkan secara merata ke seluruh bagian keranjang timbangan tersebut untuk menghilangkan busa dan bekas sabun.
 - e.) Pergunakan lap kering dan bersih untuk mengeringkan, hingga keseluruhan keranjang timbangan tersebut benar-benar kering dan bersih.
- 5.4 Untuk menjaga performa terbaik selama penggunaan, disarankan untuk melakukan kalibrasi berkala ke pusat servis Elitech atau lembaga kalibrasi yang telah diakreditasi KAN seperti BPFK.

PT. SINKO PRIMA ALLOY

TAMBAK OSOWILANGUN NO.61
PERGUDANGAN OSOWILANGUN PERMAI BLOK E7-E8
SURABAYA - 60191

TLP. 031-7492882,74828816,7482835

sinkoprma@gmail.com

teknik.sinkoprma@gmail.com

Website: <http://www.elitech.co.id>

Nomor Dokumen	: SPA-BM/PROD-03
Tanggal Terbit	: 18 Desember 2019
Revisi	: 02
File Ver	: 1.02