



Elitech[®]

TECHNOVISION

INSTRUKSI KERJA PENGEMASAN OXYGEN ANALYZER OXA-01



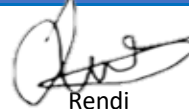
CONTROLLED COPY

PT. SINKO PRIMA ALLOY

FOR COMPANY REVIEW ONLY

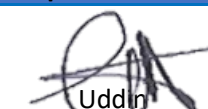
No. Dokumen : SPA-IK/PROD-180c Tanggal Terbit : 10 Oktober 2025 rev00

Dibuat Oleh


Rendi

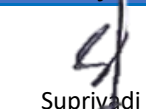
Tanggal : 07 Okt 25

Diperiksa Oleh


Uddin

Tanggal : 08 Okt 25




Disetujui Oleh


Supriyadi

Tanggal : 09 Okt 25

No. Dokumen : SPA-IK/PROD-180d**Tanggal terbit** : 10 Oktober 2025**Revisi** : 00 Hal : 1 dari 3**OXYGEN ANALYZER (OXA-01)****K3LH PENGEMASAN UNIT****CONTROLLED COPY**

- 1 Gunakan baju kerja.
- 2 Pakailah sandal karet antistatic.
- 3 Pastikan ruang kerja cukup nyaman dan sejuk dengan sirkulasi udara memadai serta pencahayaan yang terang sesuai dengan standar.
- 4 Jika saat pembersihan unit menggunakan hand glove, pastikan hand glove terbuang dengan baik.
- 5 Jika menggunakan pembersih seperti kit, spirtus, dan alkohol, pastikan kemasan terbuang dengan baik.
- 6 Jika menggunakan cutter, pastikan sisa pemotong agar tidak terbuang sembarangan.
- 7 Siapkan semua peralatan kerja pada posisi paling nyaman, aman dan mudah dijangkau.
- 8 Jauhkan dari meja kerja benda-benda cair yang tidak tertutup rapat atau gelas berisi air agar aman dari tumpahan air saat proses pengemasan.
- 9 Lakukan cross check semua sticker, accessories, dan dokumen pendukung jangan sampai terlewatkan.
- 10 Jika menggunakan lakban saat pengemasan, dan pastikan sisa penggunaan lakban terbuang dengan baik

<div><div><div><div><div><div></div><div>Elitech®</div><div>TECHNOVISOR</div></div></div><div>PT. SINKO PRIMA ALLOY</div></div></div></div>		INSTRUKSI KERJA PENGEMASAN	
No. Dokumen : SPA-IK/PROD-180d		OXYGEN ANALYZER (OXA-01)	
Tanggal terbit : 10 Oktober 2025			
Revisi : 00 Hal : 2 dari 3			
Perakitan Unit : Front Casing			
Gambar		Langkah Kerja	Tindakan Pencegahan
<div><div>Gmb.1</div></div>		<div>1 Pasang production seal dan warranty seal pada sela-sela casing OXA-01 seperti pada Gmb. 1.</div> <div>2 Pasang customer service pada back casing Gmb. 2.</div> <div>3 Letakkan packing foam pada outer kemudian pasang unit dan accecories OXA-01 seperti pada Gmb. 3.</div>	Perhatikan posisi pemasangan production seal dan warranty seal benar
<div><div>Gmb.2</div></div>			
<div><div>Gmb.3</div></div>			
		Catatan Pemeriksaan	Keterangan
		1 Pastikan posisi pemasangan production seal dan warranty seal benar.	pemriksaan dilakukan oleh QC
BAHAN BAKU			
No.	Kode barang	Nama Barang	Jumlah
1	OXA01C0100AAE	COILED CABLE	1 PCS
2	OXA01O0100AAE	OXYGEN SENSOR	1 PCS
3	OXA01P0200ASS	PACKING FOAM	1 PCS
4	OXA01O0300ASS	OUTER	1 PCS
5	OXA01O0200ASS	OXYGEN SENSOR DIVERTER	1 PCS
6	OXA01T0100ASS	T-PIECE	1 PCS
7			
BAHAN PENDUKUNG			
No.	Kode barang	Nama Barang	Jumlah
1	PU07C2501ASS	CUSTOMER SERVICE STICKER (14 X 35)	1 PCS
2	PU13P1900ASS	PRODUCTION SEAL (ELITECH)	1 PCS
3	PU13W0402ASS	WARRANTY SEAL (ELITECH)	1 PCS
ALAT KERJA			
No.	Nama Barang	Spesfikasi	
1	HAND GLOVE	Lint Free PU	
2			
3			

